

VIBRADOR PARA CLINICA

VIT

 **MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ENTRETENIMIENTO**



DESCRIPCIÓN

Se trata de un vibrador realizado expresamente para clínica dental, en la fase de la coladura de improntas y la preparación sucesiva de los moldes en yeso.

La oscilación es originada por la atracción ejercitada por un electroaimán sobre el plato metálico, acción contrastada por la reacción de amortiguadores mecánicos.

Es posible utilizar dos diferentes velocidades: la primera que tiene una oscilación más amplia y menos frecuente y la otra más baja pero más rápida.

INSTALACIÓN, EMPLEO Y ENTRETENIMIENTO

Interponer el paño aislante entre el plano de apoyo y el vibrador al fin de evitar la dispersión de potencia. Conectar al enchufe en una toma de corriente 220 V - 50 Hz con toma de tierra y elegir la velocidad conforme al procedimiento de efectuar. Se aconseja tener siempre la pieza o de toda manera apoyarlo bien al centro del plato de goma.

<u>!! ATENCION:</u>	El uso continuativo sin interrupción está permitido hasta un máximo de 4 horas; después de este período, esperar por lo menos una hora para el enfriamiento.
----------------------------	---

Se recomienda levantar periódicamente la tapa de goma y remover los residuos de revestimiento que pueden estratificar con el uso y el paso del tiempo.


<u>!! ATENCION:</u>	Cortar siempre la conexión eléctrica antes de efectuar toda intervención al interior del aparato.
----------------------------	--

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ø Plato mm	140
Alto mm	120
Peso Neto Kg	1,8
Peso Bruto Kg	2,2
Tensión de Trabajo	220 v - 50 Hz
Absorción	110W - 0,5A
Carga Máxima Kg	2

ESQUEMA ELECTRICO

SIMBOLO	DESCRIPCION
C	Conmutador
IND	Inductancia
1N4007	Diodo
F1	Fusible 3,15 A

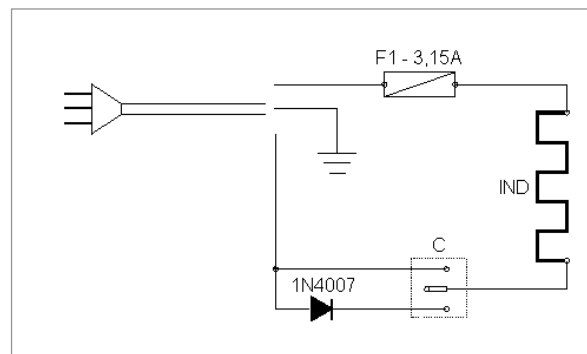


NORMAS TÉCNICAS DE REFERENCIA Y MODALIDAD DE PRUEBAS

El vibrador mod. VIT es producido en serie por la DENTALFARM en conformidad con las normas técnicas y de seguridad vigentes, según lo previsto por la Regla de la Comunidad sobre los aparatos 2006/42/CEE.


Cada aparato es ensayado singularmente para lo que concierne el aspecto práctico de funcionamiento y en seguida sometido a la prueba de una instalación automática de ensayo y asegura con la impresión de un report la conformidad con los límites establecidos.

DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN

Según las normas internacionales, este equipo ha sido clasificado como AEE (equipo eléctrico o electrónico que funciona utilizando corrientes eléctricas y electromagnéticas). De consecuencia, los desechos del equipo, cuando este ya no pueda ser utilizado, tendrán que ser eliminados de manera separada, según las disposiciones específicas de la Directiva 2002/96/CE.

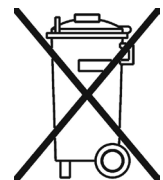

DIBUJO DE DESPIECE Y REPUESTOS VIBRADOR V I T

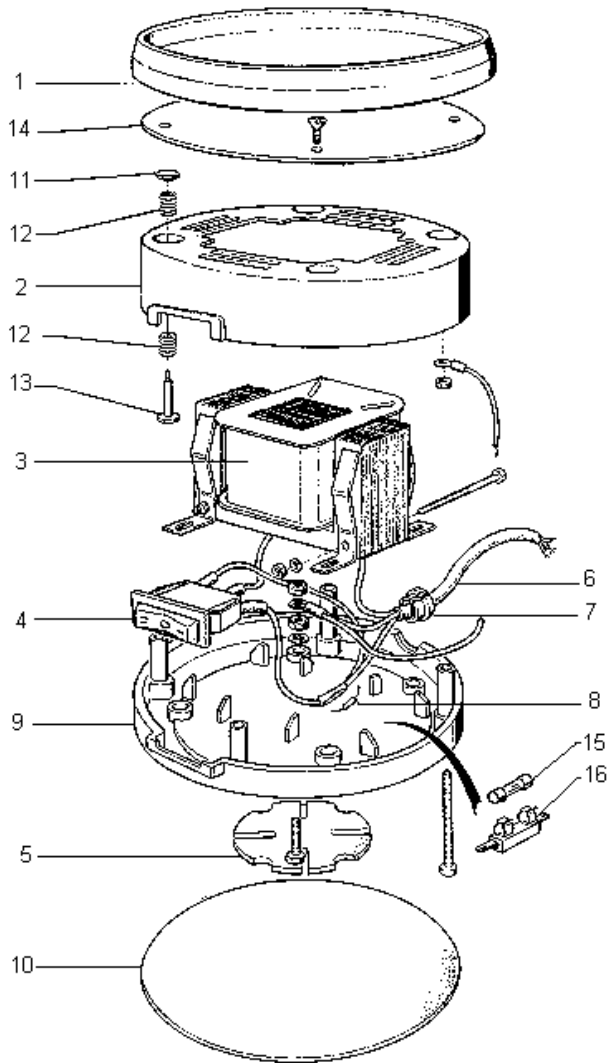NO.	CODIGO	DESCRIPCION	
1	RVV004	PLATO EN GOMA	
2	RVV002	TAPA	
3	RVV010	GRUPO ELECTROIMAN	
4	NEC011	INTERRUPTOR/DESVIADOR	
5	RVV003	FONDO ANTIVIBRACION	
6	NEV010	CABLE ELECTRICO CON ENCHUFE	
7	NEA107	AISLADOR PASAPANEL	
8	NEA180	DIODO	
9	RVV001	BASE	
10	RVV013	PAÑO AISLADOR	
11	RVV008	VIROLA GUIA DEL RESORTE	
12	RVV009	RESORTE DE REACCION	
13	RVV007	PERNO GUIA DEL RESORTE	
14	RVV005	PLATO EN HIERRO	
15	NEA070	FUSIBLE	
16	NEA063	PORTA-FUSIBLE	

DENTALFARM Srl

Via Susa, 9/A - 10138 TORINO - ITALY

☎ **SERVICIO TECNICO/COMERCIAL** - (+39) 011/4346588

☎ **SERVICIO ASISTENCIA TECNICA** - (+39) 011/4346632

📠 **FAX** (+39) 011/ 4346366 – E-mail info@dentalfarm.it

Sitio Web: www.dentalfarm.it